

Assurez-vous d'une qualité répondant aux plus hauts niveaux d'exigence



Vous utilisez les réactifs d'ATP-métrie de la marque **DENDRIDIAG®** pour surveiller la qualité microbiologique de votre air.

Pour respecter le protocole de mesure, un assortiment de quatre consommables est nécessaire : un prolongateur luer-lock, un filtre, une seringue et un tube de mesure. GL BIOCONTROL vous propose ces produits complémentaires afin de faciliter votre gestion de comptes fournisseurs.

Ces consommables ont été sélectionnés par notre département recherches & développement pour offrir la mesure la plus fiable possible. Ils sont utilisés par nos départements études, R&D, ainsi qu'analyses.

Créés pour répondre au niveau de précision exigé en laboratoire de microbiologie, ces consommables sont aussi adaptés à une utilisation sur le terrain. Ceci grâce à leur format pratique, leur simplicité d'utilisation, de conservation, leur bonne résistance au transport et les emballages choisis pour éviter tout risque de contamination.

Caractéristiques techniques




Prolongateurs luer-lock

Raccords en polypropylène stériles et à usage unique permettant de connecter le filtre à la pompe à vide. L'objectif étant de filtrer directement sur une membrane les microorganismes présents dans le volume d'air à analyser (ex : 70 litres).



Seringues

Seringues stériles 3 pièces à usage unique. Contenance 10ml avec graduations au 1/5^{ème} de millilitre. Luer-Lock centré permettant de fixer le filtre. Corps et piston en polypropylène, joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique.

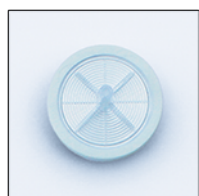

Filtres

Filtres stériles à usage unique. Membrane MF de porosité 0,45 µm et de diamètre 33 mm. Presque 20% de surface de filtration en plus par rapport aux filtres de 25 mm. La grande surface facilite la filtration de l'air en réduisant la pression à appliquer.

Caractéristiques techniques (suite)



Tubes de mesure

Tubes en polypropylène stériles et à usage unique Ø 12 x H 55 mm. Compatibles avec les luminomètres KIKKOMAN C-110 (3 ml), BERTHOLD Jr (3 ml) ou BIOSCAN LD 204 (3 ml). Nous consulter pour d'autres références.

Domaines d'application

L'assortiment de consommables pour le kit **DENDRIDIAG® AIR** est utilisé pour quantifier les microorganismes présents dans un volume d'air des installations aérauliques ou des airs d'ambiance (ex : circuit aérauliques, hôpitaux, bureaux, industries à risques comme les usines de compostage, méthanisation, élevages...). Ces consommables existent aussi pour les eaux industrielles (**IW**), les eaux sanitaires (**SW**), les eaux ultra-pures (**UPW**) et les surfaces (**BF**). Nous consulter pour les autres applications.

Conditionnement

Les quatre différents consommables sont conditionnés pour 30 mesures. Les seringues, les filtres et les prolongateurs Luer-Lock sont emballés individuellement afin d'assurer leur stérilité. Les tubes de mesure sont stériles et vendus en vrac.

Produits à associer

- 1 luminomètre (appareil de mesure) tel que le modèle « C-110 » de la marque KIKKOMAN,
- les réactifs d'ATP-métrie **DENDRIDIAG® AIR** pour le contrôle de la qualité de l'air.

Si vous souhaitez utiliser vos propres consommables plastiques, consultez-nous pour les compatibilités avec vos luminomètres ou réactifs.

4 façons de commander facilement

- @ par email à contact@gl-biocontrol.com,
- ☎ par fax au + 33 (0)9 55 25 40 31,
- ☎ par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
- ✉ par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

>>> www.gl-biocontrol.com